

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Desensibilizzante dentale

Classificazione secondo la Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE: Classe I

Attenzione

Al fine di garantire una performance ottimale in sicurezza, è assolutamente indispensabile che tutte le istruzioni indicate in questo documento vengano lette e rispettate attentamente dal medico dentista prima di procedere al trattamento.

1.CARATTERISTICHE GENERALI

Beam Desens Gel è una gel appositamente studiato per i denti sensibili.

La sua composizione permette di agire sulle cause che determinano la sensibilità dentale, in special modo esso è indicato nella sensibilità dentale che si instaura dopo il trattamento di sbiancamento dentale.

Può essere utilizzato sia per uno professionale, sia fornito per il trattamento a casa della sensibilità.

2. DENOMINAZIONI DEI PRODOTTI

Denominazione del prodotto	REF
Beam Desens gel	DEB01

3. DESTINAZIONE D'USO

Il prodotto è destinato ad un uso professionale e domiciliare. La sua funzione è quella di alleviare la sensibilità dentale

4.Contenuto della confezione

La confezione contiene:

1 Siringa di **Beam Desens Gel** da 3 ml
3 Dispensing tips
3 Brushes
Istruzioni d'uso

5.CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Conservare ad una temperatura non superiore a 25°C.

6. CONTROINDICAZIONI E MISURE DI PRECAUZIONE

L'utilizzo del prodotto non raccomandabile casi di:

- allergia note verso uno dei componenti costituenti il prodotto
- per donne in stato di gravidanza o di allattamento al seno.
- conservare lontano dalla portata di bambini.
- Eliminare le siringhe vuote secondo normative vigenti.

7.PRIMO SOCCORSO

CONTATTO CON OCCHI:

aprire bene gli occhi e lavare con acqua corrente per 15 minuti. Se sintomi di bruciore persistono, consultare un medico specialista al più presto possibile.

INGESTIONE:

in caso di ingestione di grandi quantità sciacquare la bocca con acqua,. E consultare il medico.

8. PROCEDURA DI UTILIZZO

Procedura:

Nel caso di utilizzo dopo il trattamento di sbiancamento dentale:

- Svitare con precauzione, il cappuccio di chiusura della siringa.
- Connettere il tip dispenser alla siringa, con una leggera torsione in senso orario(**Fig.1**)
- Erogare il gel sui denti, e con il pennellino distribuire uniformemente
- Lasciar agire il gel per 7-8 minuti, quindi aspirare e sciacquare.
- Ripetere il trattamento se è necessario

Nel caso di utilizzo per il trattamento domiciliare:

- Realizzare una mascherina personalizzata (**Fig.2**)
- Riempire la mascherina con un leggero strato di gel (**Fig.3**)
- Posizionarla sui denti per un periodo di 20 minuti(**Fig.4**)
- Levare la mascherina, sciacquare accuratamente la bocca, lavare la mascherina e conservarla per una futura applicazione
- La durata ed il numero di volte in cui la mascherina viene indossata dipende delle condizioni del paziente e dal dentista
- Non superare le due applicazione al giorno

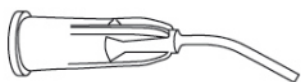


Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4

9. SIMBOLI

Si riportano i simboli e il loro significato

Simbolo	Significato	Simbolo	Significato
	Riferimento codice prodotto		Non utilizzare se la confezione risulta danneggiata
	Prima dell'uso leggere le istruzioni d'uso		Scadenza del prodotto (anno/mese)
	Limiti di temperatura di conservazione	 Beam s.r.l. Via Palizzi 143	Fabbricante
	Numero identificativo del lotto di produzione		marcatura comunità europea

Rev.00 del 18/10/2016

Beam S.r.l

Sede Legale: Via Palizzi 143

80127 Napoli (Italy)

P.Iva 07754921216

Sede produttiva : Via mandrile 104

80040 San Gennaro Vesuviano (Italy)

e-mail : research@thebeam.it